

Aquatec® | *Sollevatori per vasca e ausili per bagno*



! Certificato TÜV!



Aquatec Orca, Orca F, Orca XL

Fare il bagno con il sollevatore da vasca *Aquatec Orca* è molto semplice e confortevole. Dotato di una stabile e robusta crociera e di una base saldamente ancorata alla superficie della vasca grazie alle 4 ventose, può essere facilmente richiuso e stivato. Di serie il sollevatore è dotato di una batteria integrata alla pulsantiera agli ioni di litio, materiale che garantisce una maggiore autonomia di carica.

AQUATEC®



Yes, you can.®



Aquatec Orca

Aquatec Orca

Sollevatore per vasca da bagno con schienale prolungato e reclinabile fino a 40°. Base, sedile e schienale in polipropilene e crociera in poliammide caricata con fibra di vetro. Superficie del sedile e dello schienale lavorata antiscivolo. Rivestito con una fodera morbida bianca, antiscivolo, facile da togliere e lavabile in lavatrice a 60°. Funzionamento a batterie con fluidi movimenti di salita/discesa ed inclinazione schienale.

Motori protetti contro gli spruzzi e pulsantiera galleggiante dotata di spia per il controllo di carica delle batterie, blocco iniziale in caso di energia insufficiente e pulsante di emergenza. Assemblaggio e smontaggio rapido senza attrezzi, si fissa sulla base della vasca tramite 4 ventose (le 2 posteriori con linguette per uno stacco rapido). Altezza piano seduta ancora più basso (58 mm).



Aquatec Orca
con schienale reclinabile.




Aquatec Orca F
con schienale fisso.



Aquatec Orca XL
con schienale reclinabile, portata 170 Kg.

Dati tecnici

Codici prodotto	Aquatec Orca	Aquatec Orca F	Aquatec Orca XL
Sollevatore per vasca con fodera	1470750	1471073	1471067
Sollevatore per vasca Orca con alette larali	1471560		
Dimensioni			
Larghezza seduta senza alette	375 mm	375 mm	375 mm
Larghezza seduta con alette	715 mm (A)	715 mm (A)	715 mm (A)
Profondità seduta	490 mm (B)	490 mm (B)	490 mm (B)
Altezza max. seduta	420 mm (C)	420 mm (C)	420 mm (C)
Profondità seduta minima	60 mm	60 mm	60 mm
Larghezza dello schienale	360 mm (D)	360 mm (D)	360 mm (D)
Altezza dello schienale	665 mm (E)	665 mm (E)	665 mm (E)
Profondità totale (schienale dritto)	650 mm (F)	690 mm (F)	650 mm (F)
Profondità totale (schienale reclinato)	920 mm	-	920 mm
Altezza totale con lo schienale	1075 mm (G)	1075 mm (G)	1075 mm (G)
Larghezza della base	580 x 285 mm	580 x 285 mm	580 x 285 mm
Spessore fodera	3 mm	3 mm	3 mm
Maggiori informazioni			
Peso totale senza pulsantiera	12.1 Kg	12.1 Kg	12.1 Kg
Peso totale senza pacco batterie	-	-	-
Peso della seduta	7.5 Kg	7.5 Kg	7.5 Kg
Peso dello schienale	4.6 Kg	4.6 Kg	4.6 Kg
Peso della pulsantiera	0.4 Kg	0.4 Kg	0.4 Kg
Peso del pacco batterie	-	-	-
Portata massima	135 Kg	135 Kg	170 Kg
Lo schienale può essere reclinato fino a	40°	-	40°
Colore	Bianco	Bianco	Bianco
Codici NT	12.36.03.006	12.36.03.006	12.36.03.006
Nr. repertorio DM	109570/R	109570/R	109570/R

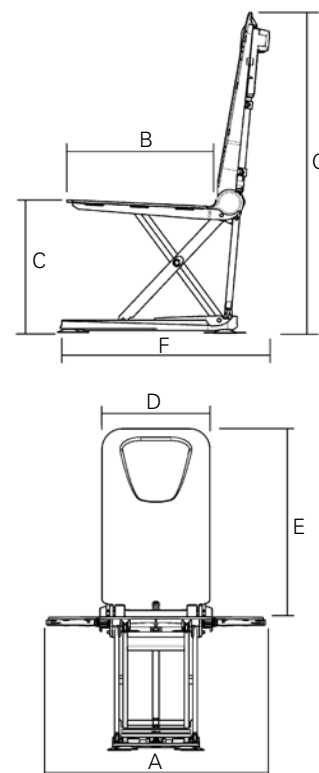

Caratteristiche e optional




Può essere utilizzato anche senza fodera protettiva.



Può essere facilmente richiuso.



Motori altamente performanti.

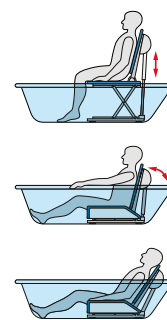

Movimenti del sollevatore.

Accessori Aquatec sollevatori per vasca



Alette laterali

Alette laterali per un posizionamento sicuro.

1471560 Aquatec **Orca** con alette laterali.



Poggiatesta regolabile in altezza

15461 Completo di viti.



Cinture di sicurezza

1471209 Cintura pettorale, bianco per **Orca / Orca XL**.

1471210 Cintura pelvica, bianco per **Orca / Orca F / Orca XL**.



Cintura pelvica e pettorale

1528702 In soffice e confortevole materiale.



Cuneo divaricatore ad estrazione rapida.

1525932 Blu, diametro 70 mm.

1525933 Blu, diametro 120 mm.



Adattatori in altezza

Per incrementare l'altezza di 20 mm, 40 mm e 60 mm.

15170 kit altezza di 20 mm con ventose.

14694 kit altezza di 20 mm senza ventose.



Guida laterale per vasca

Per evitare il contatto tra sedile ed eventuali maniglioni.



Borsa per il trasporto

Con ruote per facilitare il trasporto.