



Il montascale per la sua carrozzina

Salire e scendere le scale in sicurezza con la propria carrozzina

s-max

www.aat-online.de



Ideen bewegen mehr



Durante la vita quotidiana, per molte persone, le scale possono rappresentare un problema. Al lavoro, nel tempo libero, a scuola, le barriere architettoniche sono presenti ovunque. Il montascale s-max vi aiuta a superarle in sicurezza e facilmente.

Sentitevi liberi di muovervi nel vostro ambiente senza rinunciare ad alcuna attività. L'utilizzo del montascale s-max, in combinazione con la propria carrozzina, è possibile sia all'interno che all'esterno molto confortevolmente.

L'innovativo sistema di avanzamento si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di scala.

La gestione del montascale s-max è semplice e non richiede alcuno sforzo. Grazie alle ridotte dimensioni ed al peso contenuto, il modello s-max può essere trasportato in qualsiasi automezzo.



Maggiore qualità della vita e mobilità
— Superare le barriere ogni giorno
con la propria carrozzina

Poiché il montascale s-max per il movimento è dotato di una sola sicura staffa di appoggio, esso è particolarmente compatto e utilizzabile anche su scale strette e a chiocciola.



Tecnologia innovativa e idee originali per maggiore sicurezza e confort



Idee originali trasformate in soluzioni tecnologiche avanzate per il nuovo montascale s-max.

Il nostro concetto di sicurezza prevede una coppia di freni automatici che bloccano il montascale s-max sul bordo dello scalino, evitando così una discesa involontaria.

La tecnologia utilizzata per la movimentazione del montascale, ne permette una facile gestione senza alcuna fatica da parte dell'assistente. In particolare, i comandi sono ergonomici e ben visibili e la sensazione percepita durante l'utilizzo, sia dall'assistente che dall'utilizzatore, è di estremo confort e sicurezza, grazie alla funzione "SMART-STEP". Con questa funzione, infatti, la staffa di appoggio si muove sempre verso lo scalino, appoggiandosi delicatamente per evitare bruschi colpi e riducendo lo spostamento del peso in modo da rendere la gestione più confortevole.

L'impiego del montascale s-max in ambienti poco illuminati è agevolato dalla dotazione di due Led che rendono maggiormente visibile la scala.



Le dimensioni compatte del montascale s-max permettono la combinazione anche con carrozzine strette per bambini.

Per ulteriore sicurezza, la dotazione di serie prevede una “chiavetta” estraibile per impedire l’uso a persone non autorizzate. Tale “chiavetta” funge anche da stop di emergenza.

Per far sì che il montascale s-max si adatti ad ogni tipo di scala, la velocità è regolabile in modo lineare. Inoltre è possibile inserire la modalità “ciclo continuo” o “singolo scalino”.

Il montascale s-max si inserisce velocemente sotto la carrozzina per l’aggancio ed è subito pronto all’uso.

Viste le compatte dimensioni del gruppo propulsivo, l’applicazione del montascale s-max alle carrozzine può essere possibile a seconda dei modelli già da una larghezza di seduta di 24 cm.



La variante maggiorata del montascale s-max ha una portata di 160 Kg.



Il comando e le impugnature sono stati realizzati secondo i più moderni criteri ergonomici.

Accessori per tutte le necessità



s-max sella



SDM7 supporto universale per carrozzine e passeggini

Per coloro che hanno bisogno di un aiuto solamente sulle scale e, il particolare, quando queste sono molto strette o a chiocciola, il montascale mod. s-max sella con seggiolino è la soluzione ottimale. La pedana è regolabile in altezza e ribaltabile all'indietro. In caso di trasporto o inutilizzo, il seggiolino può essere richiuso.

Il supporto universale SDM7 permette l'aggancio di quasi tutti i tipi di carrozzine e di alcuni modelli di passeggini. E' particolarmente indicato per strutture pubbliche o per le assistenze domiciliari.



Dotazione di serie — Utili accessori

La dotazione di serie del montascale s-max prevede il gruppo propulsivo, il manico con comando ergonomico, il pacco batterie ed il caricabatteria. Il dispositivo di aggancio per combinare la carrozzina al montascale s-max viene proposto come accessorio.

Uno speciale inclinometro con segnale vibrante sul manico (fornito come accessorio), indica la corretta inclinazione del montascale.

Accessori*



Rotelline antiribaltamento



Leva per reclinazione




Supporti ruote estraibili



Dispositivo di aggancio



Inclinometro vibrante

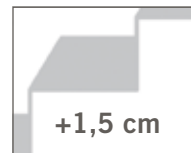

Maggiorazione dell'alzata



Invertitore di corrente



Cintura bacino con bloccaggio**



Bretellaggio "tronco-bacino"***

* Ulteriori accessori su richiesta

** Accessori in combinazione con la sedia U3

Tutta la nostra esperienza a servizio del montascale s-max

Il nostro obiettivo è aumentare l'autonomia e l'indipendenza tramite soluzioni tecnologiche innovative.

Il montascale s-max rispecchia completamente questa filosofia e raggruppa tutta la nostra esperienza maturata durante gli anni nel settore dei sistemi di movimentazione su scale.

Il montascale s-max è sicuro e presenta molti vantaggi:

- Freno automatico di sicurezza
- Supera le scale strette e a chiocciola
- Funzione singolo scalino o continuo
- Stop di emergenza a uomo presente
- LED luminosi per illuminare la scala
- Riconducibile al nomenclatore tariffario
- „Smart-Step” sistema per ridurre sollecitazioni e bruschi colpi
- Compatto, leggero e maneggevole
- Chiavetta di sicurezza

s-max_d1202_i_07_10



Lo scalamax rispetta la direttiva europea 2007/47/EG relativa ai prodotti medici

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso.



La Ditta AAT Alber Antriebstechnik GmbH è membro del QVH ed ha ottenuto il riconoscimento di qualità secondo gli standard richiesti per le carrozzine per infermi. Inoltre AAT è certificata secondo la norma DIN EN ISO 9001:2000 e DIN EN ISO 13485:2003.

Dati tecnici	s-max 160 kg	s-max 120 kg	s-max sella
Portata Max	160 kg (Utente, Carrozzina) ¹	125 kg (Utente, Carrozzina) ¹	135 kg (Utente)
Velocità (regolabile in modo lineare)	8 — 23 scalini/minuto	5 — 20 scalini/minuto	5 — 20 scalini/minuto
Autonomia con una carica (in relazione al peso)	15 — 20 piani, circa 300 scalini	15 — 20 piani, circa 300 scalini	15 — 20 piani, circa 300 scalini
Spia luminosa per utilizzo al buio	assente	presente	presente
Funzione „Smart-Step” per un maggior confort	assente	presente	presente
Altezza	min. 1200 mm max. 1650 mm	min. 1200 mm max. 1650 mm	min. 1100 mm max. 1470 mm
Accumulatori	2 x 12 V / 3,3 Ah	2 x 12 V / 3,3 Ah	2 x 12 V / 3,3 Ah
Peso pacco batterie	3,0 kg	3,1 kg	3,1 kg
Peso gruppo propulsivo	15,5 kg	14,4 kg	14,7 kg
Peso minimo	3,5 kg	3,0 kg	14,5 kg
Peso complessivo	22 kg	20,5 kg	33,5 kg
Altezza scalino superabile	22 23,5 cm (versione maggiorata)	22 23,5 cm (versione maggiorata)	22 23,5 cm (versione maggiorata)

¹ E' assolutamente necessario rispettare le indicazioni di portata indicate dal costruttore della carrozzina.

Dimostrazioni e prove a domicilio gratuite e senza impegno.



Ideen bewegen mehr

Medimec International Srl
Divisione tecnologie per la riabilitazione
Via Proventa, 52 - 48018 Faenza (RA)

Tel.: 0546-46870 - Fax: 0546-46467
medimec@medimec.it
www.medimec.it